



Therabody

TheraFace Depuffing Wand

Uživatelská příručka

1. Přehled produktů

TheraFace Depuffing Wand

Ultrapřenosný přístroj pro péči o pleť s vědecky podloženým studeným a tepelným ošetřením, který kdykoli a kdekoli odlíčí a rozzáří pleť.


TheraFace Depuffing Wand poskytuje vědecky podložené studené a tepelné ošetření obličeje v jednom přenosném zařízení. Depuffing Wand, poháněná naší patentovanou kryotermální technologií, poskytuje osvěžující studené ošetření, které pomáhá snížit otoky, oživit unavený vzhled očí a snížit výskyt pórů. Omlazující tepelné ošetření pomáhá podpořit lymfatickou drenáž, zlepšuje vstřebávání produktů a zvyšuje zářivost. A, je klinicky prokázáno, že kombinované ošetření teplem a chladem zlepšuje zářivost, pružnost a pevnost pleti již po jednom ošetření. TheraFace Depuffing Wand se dostane tam, kam ledové válečky nemohou - tvarovaná, snadno klouzající aplikační špička je navržena tak, aby dosáhla na každý centimetr obličeje, dokonce i do křivek a koutků kolem očí a nosu. Na rozdíl od ledu, který může být příliš studený a může poškodit jemnou pokožku obličeje, hůlka používá bezpečné, vědecky podložené teploty - není třeba mrazák.

Zamýšlené použití

TheraFace Depuffing Wand je určena ke snížení otoků, zlepšení zářivosti a redukci tmavých kruhů.


2. Co je v krabici

- A. TheraFace Depuffing Wand
- B. Víčko zařízení
- C. Kabel USB-C na USB-C
- D. Návod k použití

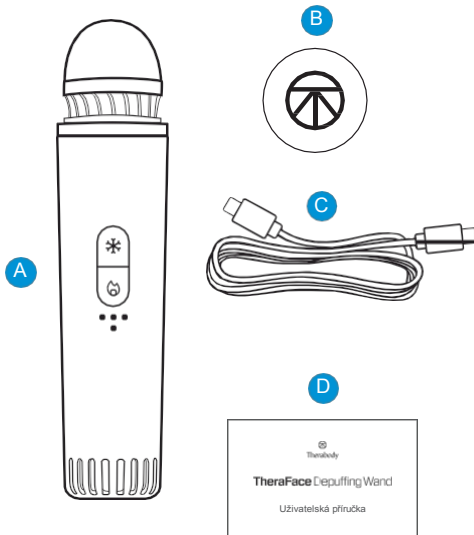

3. Seznámení se zařízením

1. Tlačítko Cold
2. Tlačítko ohřevu
3. Indikátor LED intenzity ošetření
4. LED indikátor stavu baterie
5. Odvětrání
6. Přívod vzduchu
7. Nabíjecí port USB-C
8. Hrot aplikátoru

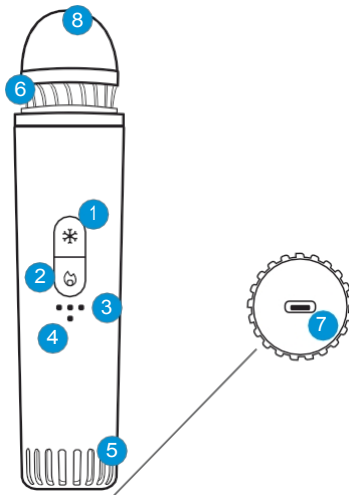

4. Použití TheraFace Depuffing Wand

1. Nabíjení zařízení. Před použitím zařízení nabijte.
2. Připravte se na léčbu. Před použitím TheraFace Depuffing Wand si obličej očistěte a zcela osušte.
***Přístroj nepoužívejte na otevřené, poškozené nebo akné pokryté pokožce.*
3. Sejměte kryt zařízení. Opatrně stáhněte krytku zařízení a sejměte ji ze zařízení. Nepoužívejte zařízení, dokud je krytka nasazena na obou koncích.
4. Zapněte zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka pro studenou nebo tepelnou úpravu zapněte zařízení a zahajte studenou nebo tepelnou úpravu. Při studeném ošetření se rozsvítí modrá kontrolka LED a při tepelném ošetření se rozsvítí oranžová kontrolka LED.
5. Zvolte požadované nastavení teploty. Stisknutím tlačítka studené nebo teplé (v závislosti na zvoleném ošetření) přepínáte mezi třemi možnostmi teploty: studená, studenější a nejstudenější; teplá, teplejší a nejteplejší. Celková doba ošetření je šest minut. Šestimínutový časovač se vynuluje, pokud během ošetření změníte režim ze studeného na horký nebo z horkého na studený. Časovač se neresetuje, pokud se v rámci ošetření změní intenzita teploty.
 - a. Nastavení za studena: K dispozici jsou tři možnosti nastavení studené teploty: 14 °C (57 °F) (výchozí), 12 °C (54 °F), 10 °C (50 °F).
 - b. Nastavení teploty: K dispozici jsou tři možnosti nastavení teploty: 35 °C (95 °F) (výchozí), 38 °C (100 °F), 42 °C (108 °F).
6. TheraFace Depuffing Wand použijte na jednu stranu obličeje. Nezakrývejte větrací otvory zařízení.

po celou dobu ošetření, abyste dosáhli cílových teplot. Přiložte přístroj na jednu stranu obličeje a jemně pod očima a po celém obličeji směrem nahoru a ven.

7. Na druhou stranu obličeje použijte TheraFace Depuffing Wand . Po třech minutách začne na přístroji blikat kontrolka, která vás upozorní, že máte přejít na ošetření druhé strany obličeje.
8. Pokračujte v používání zařízení (pokud je to nutné). TheraFace Depuffing Wand se po dokončení ošetření (celkem 6 minut) automaticky vypne. V případě potřeby můžete přístroj použít pro druhý cyklus ošetření (dalších 6 minut). Před opětovným zapnutím přístroje a jeho použitím na každé straně obličeje vyčkejte 2-3 minuty.
9. Vypněte zařízení. Stisknutím a podržením tlačítka studené nebo teplé vody kdykoli během ošetření přístroj vypněte. Po vypnutí zařízení zhasne kontrolka LED.

5. Přehled režimů TheraFace Depuffing Wand

Režim léčby	Teploty ošetření	Zamýšlený přínos léčby	Tipy pro použití
Režim vytápění	Nízká teplota: 35 °C (výchozí) Střední : 38 °C Nejvyšší teplota: 42 °C	Zvyšuje krevní oběh a snižuje bolest a napětí	Během tepelného ošetření jemně přejíždějte přístrojem po obličeji masážními pohyby, abyste zvýšili krevní oběh. Tepelné ošetření používejte před nebo při aplikaci sér a hydratačních přípravků, abyste zvýšili vstřebávání produktu.
Studený režim	Nízká teplota: 14 °C (výchozí) Střední : 12 °C Vysoká teplota: 10 °C	Snížení otoků a zánětů	Během studené léčby používejte přístroj jako studený obklad. Přístrojem jemně klouzejte krouživými pohyby směrem nahoru a ven, abyste snížili otoky. Použijte chladivou kúru ráno, abyste okamžitě osvěžili a oživilí oči a získali probuzený vzhled.

6. TheraFace Depuffing Wand: Péče a čištění

Údržba zařízení

Následující pokyny k údržbě jsou důležité pro zajištění toho, aby vaše zařízení nadále fungovalo tak, jak bylo navrženo. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že zařízení přestane fungovat.

Čisticí odpuzovací hůlka TheraFace

Před čištěním TheraFace Depuffing Wand si pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili dlouhou životnost přístroje a jeho součástí.

1. Vizualně zkontrolujte TheraFace Depuffing Wand, zda na ní nejsou zjevné známky usazování nečistot.
2. Při každodenním používání otřete základnu zařízení vlhkým hadříkem nebo čisticí utěrkou bez alkoholu.
3. Pro důkladné vyčištění kovové špičky aplikátoru používejte mezi jednotlivými použitími a/nebo uživateli <70% roztok alkoholu nebo antibakteriální utěrku (např. Lysol nebo Clorox). Alkoholový roztok ani antibakteriální utěrku nepoužívejte na žádném jiném místě zařízení.
4. Po vyčištění nechte přístroj před uložením nebo zahájením dalšího ošetření důkladně vyschnout.
5. Správně vyčištěný přístroj by neměl mít žádné viditelné známky nečistot nebo vlhkosti.
6. Pokud se do přívodu vzduchu dostanou nečistoty, gel nebo krém, opatrně je odstraňte suchým vatovým tamponem.

Poznámka: Tento výrobek není vodotěsný. Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo antibakteriální čisticí utěrkou otíráním. Neponořujte zařízení do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou. Nedovolte, aby zařízení přišlo do styku s korozivními roztoky, které mohou poškodit vzhled a funkci zařízení.

Nabíjení TheraFace Depuffing Wand

1. TheraFace Depuffing Wand je vybavena rozhraním USB-C a dodává se s nabíjecím kabelem. Před nabíjením TheraFace Depuffing Wand se ujistěte, že je zařízení vypnuté a leží na boku.
2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu USB-C na zařízení. Ten se nachází na spodní straně zařízení. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte k napájecímu adaptéru.
3. Kontrolka LED indikuje stav baterie, když je zařízení zapnuté nebo se nabíjí. Chcete-li zkontrolovat stav baterie, zapněte zařízení.
 - Bliká oranžově: Slabá baterie
 - Bliká modře: Polovina baterie
 - Bliká zeleně: Baterie je nabitá
 - Plně zelená: Plná baterie

****Poznámka:** Pokud používáte nabíječku od třetí strany, ujistěte se, že pochází od certifikovaného výrobce a že nedošlo k jejímu konstrukčnímu poškození. Nepokoušejte se používat zařízení během nabíjení.

Skladování a přeprava TheraFace Depuffing Wand

Při skladování a přepravě TheraFace Depuffing Wand držte víčko na přístroji, držte jej na boku a manipulujte s ním opatrně. Přístroj skladujte na chladném a suchém místě (teplota: 0°C/32°F - 35°C/95°F relativní vlhkost: 10~95% relativní vlhkosti). Neskladujte zařízení na místech, kde by teplota mohla překročit 35 °C/95 °F, například na přímém slunečním světle nebo ve vozidle.

Průvodce řešením problémů

Scénář	Zobrazený kód chyby	Potenciální příčina	Potenciální řešení
Baterie se nenabíjí	Indikátor stavu baterie bliká po dobu 10 sekund fialově.	Teplota okolního prostředí je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Pokud se zařízení nachází v prostředí s teplotou v rozmezí 5°C/41°F a 35°C/95°F, přestaňte zařízení používat nebo jej přestaňte nabíjet a kontaktujte společnost Therabody. Pokud je zařízení v prostředí chladnějším než 5 °C/41 °F a teplejším než 35 °C/95 °F, zkuste to znovu v prostředí s teplotou v rozmezí 5 °C/41 °F a 35 °C/95 °F poté, co je výrobek v tomto prostředí 60 minut vypnutý.
Bydlení je příliš horké	Indikátor stavu baterie bliká po dobu 10 sekund fialově.	Snímač teploty baterie detekuje přehřátí	
Zařízení se během používání vypíná	Kontrolka LED tlačítka bliká bíle po dobu 10 sekund.	Teplotní čidlo detekuje přehřátí nebo je teplotní čidlo otevřené či zkratované.	Kontaktovat Therabody Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html .
Zařízení se nezapne	Indikátor stavu baterie bliká bíle po dobu 10 sekund.	Snímač teploty baterie je otevřený nebo zkratovaný	Kontaktovat Therabody Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html .

Upozornění a pokyny k používání TheraFace Depuffing Wand (Opatření a kontraindikace)

Pozadí

Produkty Therabody jsou navrženy tak, aby uvolnily přirozenou schopnost těla dosáhnout zdraví a

blahobyt. Díky vědě a technologiím portfolio produktů Therabody lidem přístup k terapeutickým účinkům různých látek.

přírodních jevů, aby vyhovovaly jejich potřebám i preferencím. Nastanou situace, kdy je vhodné upravit způsob používání pomůcek (preventivní opatření), nebo situace, kdy není vhodné určité pomůcky používat (kontraindikace). Před použitím si v plném rozsahu přečtěte následující bezpečnostní informace pro depilační hůlku TheraFace.

Důležité bezpečnostní informace

Obecné použití TheraFace Depuffing Wand

Před použitím zařízení TheraFace Depuffing Wand si přečtěte všechna upozornění a pokyny.

Tento přístroj je určen pro osoby v dobrém zdravotním stavu. Tento přístroj je kontraindikován a neměl by být používán osobami s epilepsií, záchvaty nebo kardiopatií anamnéze.

TheraFace Depuffing Wand se nedoporučuje osobám s implantovaným elektronickým zařízením.

(např. kardiostimulátor), srdeční arytmie, nádory nebo akutní epizody zánětlivých onemocnění. Přístroj se nedoporučuje osobám, které mají arteriosklerózu, trombózy nebo implantáty v léčené oblasti těla. Přístroj by neměl být používán, pokud máte v dané oblasti tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka, mateřská znaménka nebo bradavice.

ošetření. Přístroj se nedoporučuje, pokud máte v ošetřované oblasti ekzém, lupénku, léze, otevřené rány nebo aktivní infekce jiné než mírné až středně závažné akné, jako jsou opary. Před použitím přístroje vyčkejte, až se infikovaná oblast zahojí. Přístroj by se neměl používat, pokud máte abnormální stav kůže způsobený cukrovkou nebo jinými systémovými či metabolickými onemocněními. Pokud se u vás v minulosti objevily v ošetřované oblasti výsevy oparu, nedoporučuje se přístroj používat, pokud jste se neporadili se svým lékařem a podstoupili preventivní léčbu.

Pokud jste těhotná a/nebo kojíte, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. Při prvních známkách nepohodlí okamžitě přestaňte přístroj používat.

Pokud máte nějaké zdravotní potíže, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.

TheraFace Depuffing Wand

Bezpečnost, bezpečnostní opatření a kontraindikace

Tato doporučení vycházejí z konzultací s lékařskými odborníky a z publikovaného výzkumu týkajícího se bezpečnostních opatření. Kontraindikace k datu tisku. Aktuální informace naleznete na internetové adrese <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contraindications.html>.

Bezpečnostní opatření:

Za těchto okolností je nutné postupovat s náležitou opatrností a používání zařízení může být nutné upravit. Pokud v současné době trpíte nebo máte podezření, že trpíte některým z následujících stavů, nebo pokud máte jakékoli dotazy, poraďte se s lékařem.

- Nedávné zranění nebo operace
- Nedávné ošetření obličeje, včetně neurotoxinu, dermální výplně, mikro Jehličkování, laseru a chemického ošetření.

- peeling až do úplného zahojení kůže
- Hypertenze (kontrolovaná)
- Abnormální pocity (např. necitlivost)
- Citlivost na chlad nebo teplo
- Mírná periferní neuropatie
- Toto zařízení by NEMĚLO nijak omezovat krevní oběh.

Kontraindikace:

Níže jsou uvedeny okolnosti, kdy potenciální rizika mohou převážit nad přínosy. Před použitím se poraďte s lékařem.

- Kožní vyrážka, otevřené rány, puchýře, místní záněty tkání, infekce, modřiny nebo nádory.
- Hypertenze (nekontrolovaná)
- Cévní/arteriální a oběhová onemocnění, včetně krevních sraženin, flebitidy, trombózy a křečových žil.
- akutní nebo závažné srdeční, jaterní nebo ledvinové onemocnění
- Závažná periferní neuropatie nebo jiné příčiny smyslového postižení

- Melasma nebo hyperpigmentace (zejména pokud se zhoršuje mírným teplem).
- Přímý tlak na nedávné nebo hojící se chirurgické místo nebo hardware
- Poruchy krvácení
- Poruchy pojivové tkáně
- Léky, které mohou měnit nebo ředit krev nebo měnit pocity.
- Kardiostimulátor nebo ICD
- Embolizace v anamnéze
- Alergie na materiál zařízení (kov, guma, plast, silikon)
- Nepoužívejte v případě nevysvětlitelné bolesti.

Omezená záruka

Úplné informace o záruce naleznete na adrese www.therabody.com/warranty.
Zákazníci, kteří potřebují podporu produktu, by měli navštívit stránku <https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html>, kde naleznou dostupné kontaktní metody.

Registrováno FDA

Omezená záruka pouze při nákupu u autorizovaného prodejce

© 2024 Therabody, Inc. Všechna práva vyhrazena. Patenty na www.therabody.com/patents

Vyrábí a distribuuje: Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Apartmá 300
Los Angeles, CA 90025
Spojené státy americké

Na australském trhu je záruka na depilační hůlku TheraFace 1 rok.

Pouze pro australský trh: Na nákup tohoto zařízení se vztahuje omezená záruka. Úplné informace o právech, která vám tato záruka poskytuje, naleznete na adrese <https://therabody.com/anz/en-au/warranty-support/>.

a distribuuje:

Therabody Australia Pty Ltd
Waterman Business Centre
175 Maroondah Highway
Suite 16, C307, Level 3
Ringwood Vic 3134 Austrálie

Therabody International Limited 5th
Floor, 40 Mespil Road, DO4C2N4
Dublin, Irsko

Therabody UK Limited
Portsoken House 155-157
The Minorities, Londýn,
Velká Británie, EC3N1LJ

VAROVÁNÍ JEDNOTEK

PŘEDPOUŽITÍM NEBO NABÍJENÍM TheraFace Depuffing Wand si přečtěte všechny pokyny a varovná označení v tomto návodu, na nabíječe a na zařízení.

Pokud se zařízení nezapne nebo se indikátoru baterie zobrazí nízký stav baterie, před prvním použitím jej nabijte. TheraFace Depuffing Wand je určena pro komerční nebo domácí použití.

TheraFace Depuffing Wand nejsou určeny k diagnostice, zmírnění nebo léčbě nemocí. Therabody se snaží, aby TheraFace Depuffing Wand byl nejbezpečnější pro zamýšlené použití. TheraFace Depuffing Wand je pokročilý mechanický nástroj s elektrickými součástmi. Pokud se TheraFace Depuffing Wand a její příslušenství nepoužívají nebo neudržují správně, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Při používání TheraFace Depuffing Wand je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření:

1. POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYNŮ. TheraFace Depuffing Wand používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k použití TheraFace Depuffing Wand. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Therabody. Neprovádějte žádnou jinou údržbu, než jakou doporučuje společnost Therabody.

2. NE PRO DĚTI. TheraFace Depuffing Wand a nabíječka nejsou určeny pro použití malými dětmi nebo osobami sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud odpovědný

dospělá osoba jim poskytla dohled nebo instrukce. TheraFace Depuffing Wand se nesmí používat jako hračka. Doporučte dětem, aby si s TheraFace Depuffing Wand ani s nabíječkou nehrály. Osoby mladší 18 let by měly mít při používání tohoto zařízení zajištěn dohled dospělé osoby.

3. NABÍJENÍ. Nabíjecí kabel se do zařízení zasouvá pouze jedním správným způsobem. Kabel nezasouvejte na místo silou. Zařízení plně nabijte alespoň jednou za šest měsíců, abyste zabránili poškození zařízení a baterie.

4. Po úplném nabití baterie nenechávejte zařízení připojené k napájecímu adaptéru déle než jednu hodinu. Baterie obsahuje ochranný systém, který zabraňuje riziku přehřívání. Přehřívání však může časem zkrátit její životnost.

5. MÍSTA NABÍJENÍ. Před nabíjením se ujistěte, že kontrolka stavu baterie vypnutá. Vložte kabel USB-C do portu (na spodní straně zařízení) a nabíjejte TheraFace Depuffing Wand. Během nabíjení nepoužívejte zařízení TheraFace Depuffing Wand. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, když je kabel USB-C připojen ke zdroji napájení, protože může způsobit nepříjemné pocity nebo zranění. Nespěte a nesedejte si na konektor USB-C. TheraFace Depuffing Wand nabíjejte pomocí nabíječky USB-C. TheraFace Depuffing Wand by se měla nabíjet v dobře větraném a suchém prostředí. TheraFace Depuffing Wand nenabíjejte venku, v koupelně ani ve vzdálenosti do 10 stop (3,1 metru) od vany nebo bazénu. TheraFace Depuffing Wand ani nabíječku nepoužívejte na mokřích površích.

nevystavujte nabíječku vlhkosti, dešti nebo sněhu. TheraFace Depuffing Wand ani její kompatibilní nabíječku nepoužívejte v přítomnosti výbušného prostředí (plynné výpary, prach, obilí, kovové prášky nebo hořlavé materiály). Mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit požár. Dbejte všech značek a pokynů.

6. ODPOJENÍ NABÍJEČKY. Zařízení TheraFace Depuffing Wand nepřebíjejte. Abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a , vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Nikdy nepřenášejte nabíječku za kabel. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran. Nepoužívejte ani nenabíjejte s poškozenou šňůrou.

Nenatahujte šňůru nabíječky ani ji nenamáhejte. Šňůru udržujte mimo dosah zahřátých povrchů. Nemanipulujte s nabíječkou, svorkami ani depurační hůlkou TheraFace mokřýma rukama.

Tento přístroj vždy odpojte od elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním.

7. ZAŘÍZENÍ NEMAČKEJTE, NEUPUŠŤTE ANI NEPOŠKOZUJTE. NABÍJEČ. Nepoužívejte napájecí adaptér nebo nabíjecí kabel, který dostal ostrý úder, byl upuštěn, přejet nebo poškozen. Neprorážejte ani nepoškozujte. Propíchnutí přístroje může vést k nesprávné funkci.

8. PÉČE O NAPÁJECÍ ADAPTÉR A NABÍJECÍ KABEL. Odpojte napájecí adaptér a nabíjecí kabel, pokud je nepoužíváte. Abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a , vytáhněte zástrčku, nikoli kabel. Kabel skladujte tak, abyste zajistili, že nebude

na ně šlápnout, zakopnout o ně nebo je jinak poškodit či namáhat. Kabel udržujte mimo dosah zahřátých povrchů, oleje a ostrých hran. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno nebo spadlo do vody. Nenatahujte kabel nabíječky nevystavujte kabel napětí. S kabelem nemanipulujte mokřýma rukama. Pro dlouhodobé skladování skladujte s plně nabitou baterií. Společnost Therabody nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání nabíječek třetích stran.

9. POUŽITÍ. Pokud pociťujete silnou bolest, přestaňte TheraFace Depuffing Wand používat. Ujistěte se, že kontrolka stavu baterie je vypnutá, pokud zařízení nepoužíváte. Přístroj TheraFace Depuffing Wand používejte na pleť bez make-upu. Zařízení používejte v chladném a suchém prostředí.

10. NEPOUŽÍVEJTE POD PŘIKRÝVKOU A POLŠTÁŘEM. Nadměrné zahřívání může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

11. SLUŽBA. Pokud přístroj nefunguje správně, dostal prudký úder nebo byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej. Nepokoušejte se opravovat nebo rozebírat zařízení, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

12. PÉČEO ZAŘÍZENÍ. S TheraFace Depuffing Wand zacházejte opatrně. Obsahuje elektronické součástky, které se mohou při pádu poškodit, popálit,

propíchnuty nebo rozdrčeny. TheraFace Depuffing Wand nerozebírejte a nepokoušejte se ji sami opravovat. Rozebírání TheraFace Depuffing Wand může vést k jejímu poškození, ztrátě odolnosti vůči vodě a může způsobit zranění. Pokud dojde k poškození TheraFace Depuffing Wand nebo k poruše její funkce, kontaktujte zákaznický servis Therabody. Nepoužívejte poškozenou TheraFace Depuffing Wand, například viditelným vniknutím vody, protože mohou způsobit zranění. Vyhněte se silnému působení prachu nebo písku.

13. POKYNY K ČIŠTĚNÍ. Vizuálně zkontrolujte, zda na TheraFace Depuffing Wand nejsou zjevné známky usazování nečistot. Otřete zařízení vlhkým hadříkem nebo čisticí utěrkou bez alkoholu. Po vyčištění nechte přístroj před uložením nebo zahájením dalšího ošetření důkladně vyschnout. Správně vyčištěný přístroj by neměl mít žádné viditelné známky nečistot nebo vlhkosti. Poznámka: Tento výrobek není vodotěsný. Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo antibakteriální utěrkou otřením. Neponořujte zařízení do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou. Nedovolte, aby zařízení přišlo do styku korozivními roztoky, které mohou poškodit vzhled a funkci zařízení.

14. Demontáž nebo nesprávná montáž může vést k riziku úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vystavení chemickým látkám z baterie. Záruka zaniká, pokud jsou zařízení, baterie nebo nabíječka rozebrány nebo pokud byly odstraněny jakékoli součásti.

15. UCHOVÁVÁNÍ TheraFace Depuffing Wand A NABÍJECÍHO KABELU.

Skladujte na chladném a suchém místě. Zařízení nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 35 °C/95 °F a 0 °C/32 °F. Neskladujte zařízení ani nabíjecí kabel na místech, kde by teplota mohla překročit 35 °C/95 °F, například na přímém slunečním světle, ve vozidle nebo v létě v kovové budově.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v oblasti instalace v obytných budovách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Existuje však nezaručuje, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo

televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/televizoru.

Zdravotnická EMC+Bezpečnost

Požadavek IEC 60601-1 a IEC60601-1-11(Upozornění)---Pro zdravotnické přístroje platí pro USA, CA

Toto zařízení je typ BF aplikované zařízení. Vyhovuje normám pro elektrickou bezpečnost ve zdravotnictví (IE(60601-1)).

Tento přístroj rovněž splňuje požadavky normy EMC pro zdravotnické přístroje (IEC 60601-1-2). Byl testován a shledán vyhovujícím limitům elektromagnetické kompatibility (EMC) pro zdravotnické přístroje podle normy IEC 60601-1-2: 2014. Tyto limity jsou určeny pro poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v atypických zdravotnických zařízeních.

1* UPOZORNĚNÍ: Je třeba se vyvarovat používání tohoto zařízení v sousedství jiných zařízení nebo sobě, protože by mohlo dojít k jeho

vést k nesprávnému provozu. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení sledovat a ověřit, zda fungují normálně.

2* VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství. snímačů a kabelů než těch, které jsou specifikovány nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a vést k jeho nesprávnému provozu.

3* VAROVÁNÍ: Přenosné rádiové komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely) by nemělo být používáno blíže než 30 cm 12 palců) od jakékoli části ZAŘÍZENÍ ME, včetně kabelů určených výrobcem. V opačném případě může dojít ke zhoršení výkonu tohoto zařízení.

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise - pro všechna ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise

TheraFace Depuffing Wand je určena pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel TheraFace Depuffing Wand by měl zajistit, aby byla v takovém prostředí používána.		
EMISNÍ TEST	SOUHLASNOST	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
VF emise CISPR 11	Skupina 1	TheraFace Depuffing Wand využívá ke své vnitřní funkci pouze radiofrekvenční energii. Proto jsou její RF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolních elektronických zařízení.
VF emise CISPR 11	Třída B	TheraFace Depuffing Wand je vhodná pro použití ve všech zařízeních, včetně domácností a zařízení přímo připojených k veřejné síti nízkého napětí, která zásobuje budovy používané pro domácí účely.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Nepoužije se	
kolisání napětí emise blikání IEC 61000-33	Nepoužije se	

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost - pro všechna ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

TheraFace Depuffing Wand je určena pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel TheraFace Depuffing Wand by měl zajistit, aby byla v takovém prostředí používána.			
TEST IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ SHODY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	kontakt ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	kontakt ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud je podlaha pokryta syntetickým materiálem, měla by relativní vlhkost nejméně 30 %.
Elektrostatický přechodový jev / výboj IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení	NEUPLATŇUJE SE	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Přepětí IEC 61000-4-5	$\pm$ Diferenciální režim 1 kV ± 2 kV ve společném režimu	NEUPLATŇUJE SE	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Poklesy napětí, krátká přerušení a kolísání napětí na vstupních napájecích vedeních IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu g) Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°. 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů Jednofázové: při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	NEUPLATŇUJE SE	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel názvu zařízení vyžaduje nepřetržitý provoz během přerušení napájení z elektrické sítě, doporučuje se, aby byl název zařízení napájen z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.
Frekvence napájení (50/60 Hz) magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Výkonová magnetická pole by měla být na úrovni charakteristické pro typické místo v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.
POZNÁMKA U _j je střídavé síťové napětí před použitím zkušební úrovně.			

POZNÁMKA 1 Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické záření je absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

a Pásmo ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz; 26,957 MHz až 27,283 MHz; a 40,66 MHz až 40,70 MHz. Radioamatérská pásma mezi 0,15 MHz a 80 MHz jsou 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až 4,0 MHz, 5,3 MHz až 5,3 MHz.

5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz a 50,0 MHz až 54,0 MHz.

b Intenzitu pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, radioamatérské vysílání, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými RF vysílači je třeba zvážit elektromagnetický průzkum lokality. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá TheraFace Depuffing Wand , překročí výše uvedenou platnou úroveň shody s RF, měla by být TheraFace Depuffing Wand pozorována, aby se ověřila její normální funkce. Pokud je pozorován abnormální výkon, může být nutné přijmout další opatření, například změnit orientaci nebo přemístit TheraFace Depuffing Wand .

c Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V/m.

Doporučené odstupové vzdálenosti mezi přenosným a mobilním rádiovým komunikačním zařízením a ZAŘÍZENÍM nebo SYSTÉMEM - pro ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY

Doporučené vzdálenosti mezi
přenosná a mobilní RF komunikační zařízení a TheraFace Depuffing Wand .

TheraFace Depuffing Wand je určena pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém se kontrolují vyzařované rádiové poruchy. Zákazník nebo uživatel TheraFace Depuffing Wand může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a TheraFace Depuffing Wand , jak je doporučeno níže, v závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení.				
Maximální jmenovitý výkon vysílače W	ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST FREKVENCE VYSÍLAČE M			
	150 Khz až 80 mhz Mimo ism a radioamatérská pásma	150 Khz až 80 mhz V ism a radioamatérských pásmech	80 Mhz až 800 mhz	800 Mhz až 2,7 Ghz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.20	0.035	0.07
0.1	0.38	0.63	0.11	0.22
1	1.2	2.00	0.35	0.70
10	3.8	6.32	1.10	2.21
100	12	20.00	35	70

U vysílačů s maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučenou vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

Hlášení nežádoucích událostí úřadu FDA

MedWatch je program Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro hlášení závažných reakcí, problémů s kvalitou výrobků, terapeutické neekvivalence a chyb při používání humánních léčivých přípravků, včetně léků, biologických přípravků, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, kojenecké výživy a kosmetiky.

Pokud se domníváte, že se u vás nebo u někoho z vaší rodiny vyskytla závažná reakce na léčivý přípravek, doporučujeme vám, abyste formulář pro hlášení předali svému lékaři. Váš poskytovatel zdravotní péče může poskytnout klinické informace na základě vaší zdravotní dokumentace, které mohou pomoci úřadu FDA vyhodnotit vaše hlášení. Chápeme však, že si z různých důvodů nemusíte přát, aby formulář vyplnil váš poskytovatel zdravotní péče, nebo se váš poskytovatel zdravotní péče může rozhodnout formulář nevyplnit. Váš poskytovatel zdravotní péče není povinen podávat hlášení úřadu FDA. V těchto situacích můžete online formulář pro hlášení vyplnit sami.

Po obdržení hlášení obdržíte od úřadu FDA potvrzení. Hlášení přezkoumávají pracovníci FDA. Osobně vás budou kontaktovat pouze v případě, že budeme potřebovat další informace.

Předkládání hlášení o nežádoucích příhodách agentuře FDA

Pro zaslání dobrovolného hlášení nežádoucích účinků úřadu FDA použijte jeden z níže uvedených způsobů:

1. Zpráva je k dispozici online na adrese www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home
2. Formulář pro hlášení spotřebitelů FDA 3500B. Podle pokynů na formuláři jej faxem nebo poštou. Návod k vyplnění formuláře naleznete na webu MedWatchLearn. Formulář je k dispozici na adrese: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm349464.pdf.
3. Telefonické hlášení můžete na čísle 1-800-FDA-1088.
4. Formulář pro hlášení FDA 3500 běžně používaný zdravotnickými pracovníky. Formulář je k dispozici na adrese: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanualsforms/forms/ucm163919.pdf.



Therabody

Born in Los Angeles, Kalifornie.
Určeno pro každého.



@Therabody