

THERAGUN

Wave Roller

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.

THERAGUN
by Therabody



Dovozce | Dovoza | Importőr | Importator:
Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Záruka se na mechanické poškodení nevztahuje.
Záruka sa na mechanické poškodenie nevztahuje.
A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
Garanția nu acoperă daunele mecanice.


CZ

Wave Roller™

Intelligentní vibrační pěnový váleček od tvůrců Theragun.

- A Tlačítka Plus a Minus rychlosti
- B LED kontrolka baterie
- C LED indikátor rychlosti
- D Nabíjecí port

Důležité bezpečnostní pokyny naleznete
v příbalovém letáku

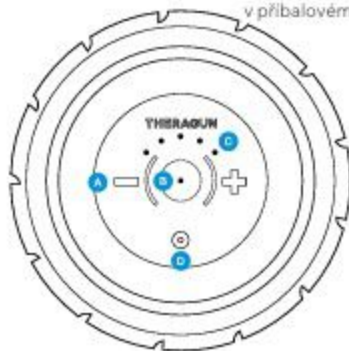

Použití válečku Wave Roller

1. Chcete-li zapnout váleček Wave Roller, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1-2 sekund.
2. Vlnový váleček se spustí na nejnižším z pěti nastavení. Chcete-li zvýšit rychlost, krátce stiskněte tlačítko plus, dokud se nezobrazí požadovaná rychlost.
3. Přístroj přikládejte pod ošetřovanou oblast postupně a podle potřeby vyvíjejte lehký až mírný tlak.
4. Chcete-li zařízení Wave Roller vypnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne.

Chytré funkce

Wave Roller™ je chytré zařízení s připojením Bluetooth, které je navrženo pro bezproblémové spárování s aplikací Therabody. Po stažení aplikace budete provedeni nastavením krok za krokem a bude vám ukázáno, jak zařízení spárovat.



Naskenujte QR kód
a začněte.



Nabíjení

1. Po vypnutí zařízení zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu.
2. Kontrolka LED na tlačítku napájení bude blikat, dokud se plně nenabije.
3. Nabíjení je dokončeno, když kontrolka LED na tlačítku napájení svítí zeleně.
4. Úroveň nabití baterie se při zapnutém zařízení nepřetržitě zobrazuje na kontrolce LED tlačítka napájení. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, když je zařízení vypnuté, krátce stiskněte tlačítko napájení a kontrolka LED baterie začne blikat, čímž se zobrazí úroveň nabití baterie.

Bezdrátové nabíjení válečku Wave Roller

Úroveň nabití baterie na válci
Wave Roller je indikována
následujícími barvami:

- Bliká červeně: Nízký stav nabití
- Bliká modře: Poloviční nabití
- Bliká zeleně: Vysoké nabití
- Plně zelená: Plně nabitá